

サラヤ ディスポーザブル式薬液ディスペンサー


取扱説明書

UD-7500 (タッチフリータイプ)

お買い求めいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

アルカリ乾電池 (単1×4本) 使用

※本製品にアルカリ乾電池は付属していません。
別途お買い求めください。

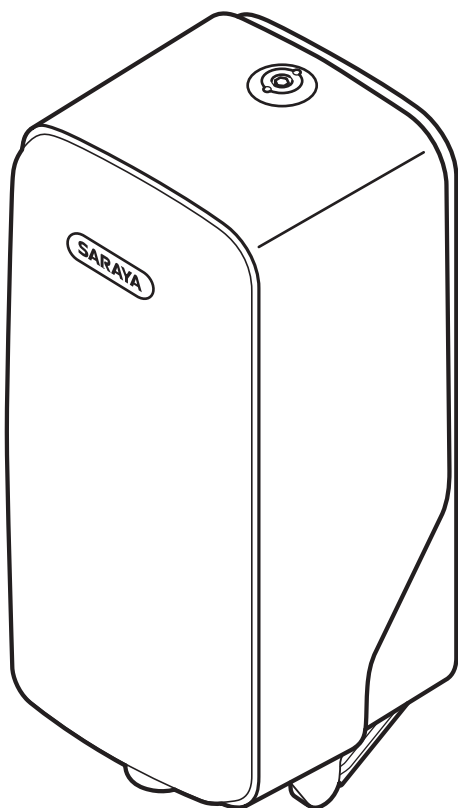

SARAYA

目次	ページ
安全上のご注意	4
取り付け上の注意事項	
使用上の注意事項	
移設・修理時の注意事項	
廃棄時の注意事項	
各部の名称	7
取り付けについて	8
取り付けに適した場所	
取り付けに必要な工具	
電源工事について	
取付方法	
ご使用方法	11
カバーの開閉方法	
乾電池の装着または交換方法	
薬液の装着または交換方法	
使用方法	
吐出(噴射)回数の設定方法	
お手入れ方法	15
ノズルの掃除方法	
緊急時の対処方法	
修理を依頼される前に	17
保証とアフターサービス	17
保証について	
アフターサービスについて	
仕 様	18
お問い合わせ窓口	20

付属品一覧

- アルコールシート(1枚)
- ねじセット(タッピンねじ5個、プラグ5個)
- 鍵(1個)
- 取扱説明書(1冊)
- 登録カード(1枚)
- トレー(1個)
- 両面テープ(1枚)
- 火気厳禁ラベル(1枚)
- 蛇腹ポンプ固定板1(1個)
- 蛇腹ポンプ固定板2(1個)
- 吐出量調整板(1個)

オプション品

- ACアダプター(入力:AC100V~120V(50/60Hz)出力:DC6V)

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでもご確認いただける場所に保管してください。
本取扱説明書で不明な点は、当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)までご連絡ください。

表示の説明

	危険	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷(※1)などの危険がさしそまっているもの
	警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷(※1)などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに傷害(※2)、または家屋・家財などの損害(※3)に結びつくもの

図記号の説明

	絶対に行わないでください
	必ず指示に従ってください
	注意してください

(※1)重傷とは、失明やケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を要するものをさします。
(※2)傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
(※3)損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

取り付け上の注意事項

危険



火気のある場所に取り付けない。また、火花が出るような器具の近くにも取り付けない。万一に備えて、製品取付場所の近くに消火器を設置する。
アルコール系消毒液など引火性の液を使用した場合、火災の原因になります。



警告



仕様に定める規格に従う。

規格外での設置、使用はやめてください。感電や火災、故障などの原因になります。



丈夫な壁面に取り付ける。
塗装面には両面テープで
使用しない。

落下によるケガや故障の原因になります。



屋内で直射日光の当たる場所に取り付けない。また、高温になる場所にも取り付けない。

誤作動や火災の原因になります。




注意



誤作動防止のため、必ずトレー(付属品)を取り付ける。
また、カバーを開けた際にカバーとトレーがあたらないように、本体下面からトレーまでの距離を300mm以上確保する。

300mm以上スペースを確保しないと、故障や誤作動の原因になります。

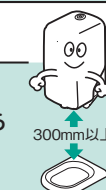

使用上の注意事項

⚠ 危険

アルコール系消毒液で濡れた手を火気に近づけない。



薬液中のアルコール成分に引火した場合、やけどや火災の原因になります。

⚠ 警告

都市ガスなどのガス漏れがあったときは、本体やコンセントには手を触れず、窓を開けて換気する。

引火爆発し、やけどや火災の原因になります。



ACアダプター（オプション品）は、刃の根元まで確実に差し込み、ほこりが堆積しないように定期的に清掃する。

異常発熱や火災の原因になります。



濡れた手でACアダプター（オプション品）を持たない。また、ACアダプター（オプション品）に水をかけない。

感電やショート、火災の原因になります。



ACアダプター（オプション品）のコードを傷付けたり、無理に曲げる・束ねるなどして過剰なストレスを加えたり、加熱したりしない。

電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。



本体に直接水などをかけない。

感電や火災、漏電による故障の原因になります。



換気が十分に行える場所に設置する。アルコール系消毒液を使用するときは、十分に換気を行う。

換気が不十分な場合、アルコールが充満して引火する危険性があります。また、気分が悪くなることがあります。



ACアダプター（オプション品）を使用する場合、電源は交流100Vのコンセントを単独で使用する。

分岐コンセントなどは使用しないでください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

異常発生時には直ちに運転を停止し、乾電池、またはACアダプター（オプション品）を抜く。

感電や火災などの事故の原因になります。詳しくはお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。



ACアダプター（オプション品）をコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ずACアダプター（オプション品）の本体を持って引き抜く。

ACアダプターが破損し、感電や火災の原因になります。



ACアダプター（オプション品）のコードがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、火災の原因になります。



薬液は絶対に飲まない。

健康を害する恐れがあります。



アルコール系消毒液の霧を吸い込まない。

薬液中のアルコール成分は、鼻やノドなどの粘膜に刺激があります。




使用上の注意事項（続き）

⚠ 注意

本体の上部に物を置かない。

落下によるケガや故障の原因になります。

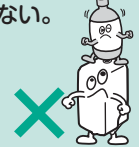

落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。


故障による感電、火災の原因になります。

長期間使用しないときや保管するときは、本体とトレー（付属品）を拭き、必ず薬液を取り外す。また、本体内の乾電池やACアダプター（オプション品）を抜く。

漏電による感電、火災の原因になります。

乾電池とACアダプター（オプション品）は併用して使用しない。

故障の原因になります。

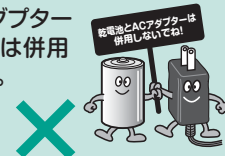

新しいアルカリ乾電池（単1×4本）を使用する。

最良の状態で使用するために、新しいアルカリ乾電池を使用してください。



当社指定の薬液以外は使用しない。

故障の原因になります。



薬液を取り扱うときは、その薬液の「使用上の注意」などをよく読んでから使用する。



薬液を装着するときは、薬液がこぼれないように注意する。薬液がこぼれた場合は、すぐに拭き取る。

床面などに薬液が付着すると、床面が変色する原因になります。また、すべて転倒するなど人身に危険が生じる恐れがあります。



移設・修理時の注意事項

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

故障や火災などの原因になります。装置について不明な点などございましたら、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。



廃棄時の注意事項


製品および乾電池を廃棄するときは、各国・地域の法律または規則に従う。




トレー（付属品）に溜まったアルコール系消毒液を捨てるときは、火気のある場所に捨てない。

火災の原因になります。

各部の名称

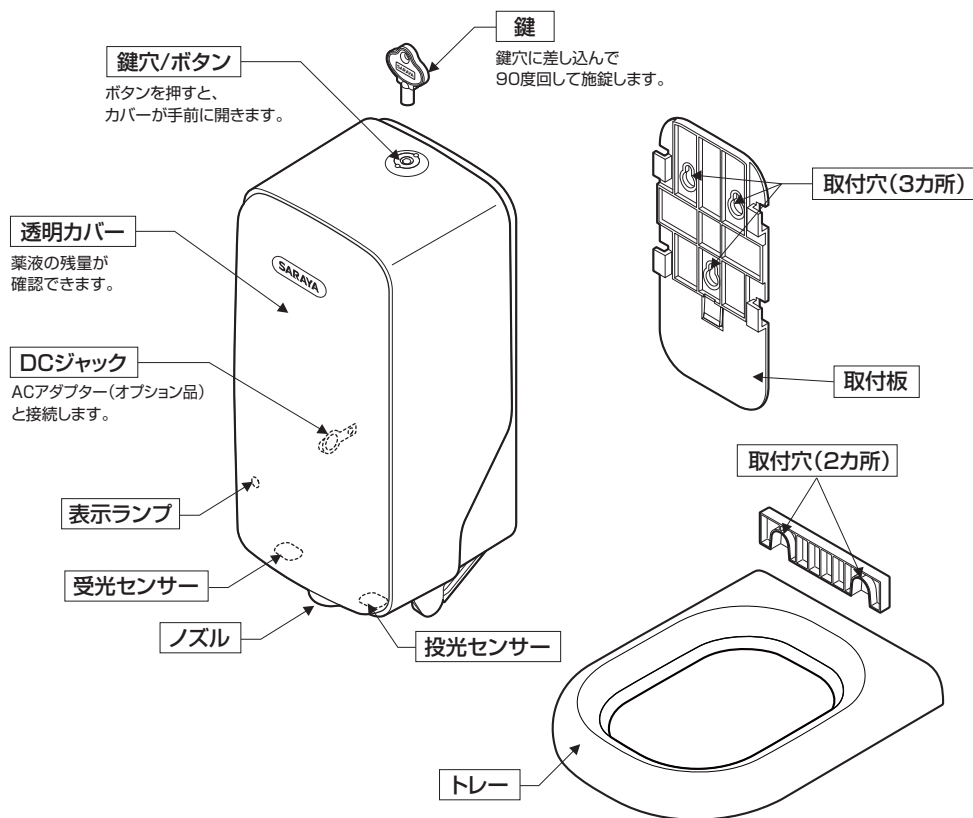

外観寸法図

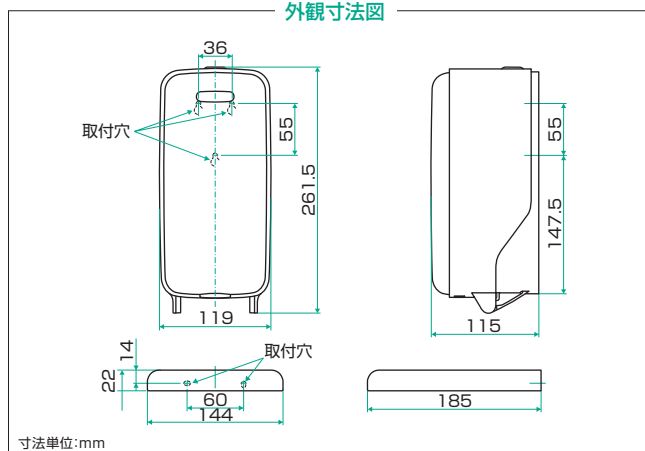

取り付けについて

取り付けに適した場所

壁面が丈夫なところ

弱い壁面 (コンパネ [6mm以下] や石膏ボードなど) の場合は、補強材で補強してください。落下による故障の原因になります。

熱気や凍結のないところ

直射日光や調理器具・暖房器具などの熱の影響を受けると、火災の原因になる事も考えられます。周囲温度が0℃以上、35℃以下のところに取り付けてください。

火気のないところ

火または火花を生じる器具のそばなどへの取り付けは行わないでください。火災の原因になります。

湿気が少ないところ

湿気の多いところや、水のかかるところに取り付けると、サビや動作不良を発生する恐れがあります。

直射日光が当たりにくいところ

直射日光が当たると、誤作動の原因になります。

取り付けに必要な工具

- φ6ドリル刃 ●φ2.5ドリル刃 ●電動式ドリル(振動ドリル) ●プラスドライバー
- メジャー、ものさしなど ●ハンマー(樹脂ヘッド)

電源工事について

ACアダプター (オプション品) を使用する場合

- コンセントがない場合は、お買い上げの販売店かお近くの電気工事店にご相談ください。
- 電源は交流100V~120V (50/60Hz) です。必ずこれに適した配線をしてください。
- コンセントは水のかからないところに付けてください。
- ACアダプターのコードは長さ1.8mです。コンセントはこれに適した位置に設置してください。

取付方法

● 取り付ける壁を確認します。

取り付ける壁がコンクリートの場合は、ねじセット(付属品)を使用してください。
弱い壁面(コンパネ[6mm以下]石膏ボードなど)の場合は、補強材で補強してからタッピンねじ、もしくはパラシュートビス(付属していません)を使用してください。

① 取付板の取り付け

本体下面からトレーまでの距離を300mm以上確保してください。また、鍵を鍵穴に差し込むため、天面から上は100mm以上あけてください。

注 意


本体下面からトレーまでの距離を300mm以上確保しないと、次のような障害が発生します。

1. センサーの誤作動

トレーからの光の乱反射により、誤作動を起こす恐れがあります。また、取付場所によっては誤作動する場合があるので、あらかじめアルカリ乾電池を装着し(12ページ「乾電池の装着または交換方法」参照)、誤作動しないことを確認してから取り付けてください。

2. カバーの破損

カバーを開けた際にカバーとトレーがあたり、カバーが破損する恐れがあります。

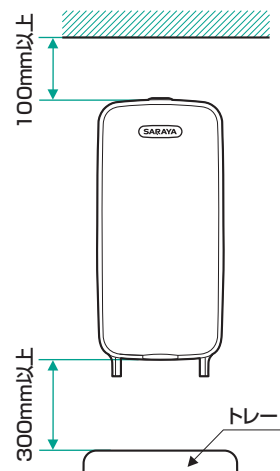


■ ねじで取り付ける場合

取付板の穴に合わせて壁面に穴をあけ、固定します。

注 意

1. 壁面がコンクリートの場合は、振動ドリルなどで穴(φ6mm・深さ30mm~40mm)をあけ、プラグ3個を打ち込み、タッピンねじ3個で固定してください。
2. 壁面が木製の場合は、案内穴(φ2.5mm)をあけてから、タッピンねじ3個で固定してください。
3. 壁面に穴をあけるときは、他の配管・配線が通っていないことを確認してください。
4. 切粉はきれいに取り除いてください。

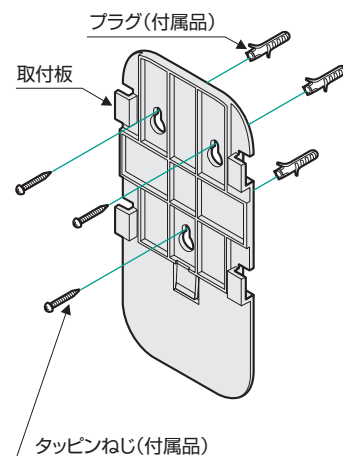


■ 両面テープで取り付ける場合

壁面に取付穴があけられない場合は、両面テープ(付属品)で取り付けてください。

取付板に両面テープ(付属品)を貼り付けます。固定する壁面のゴミや汚れ、油分をアルコールシート(付属品)できれいに拭き取り、10分間以上乾かします。

次に、両面テープ(付属品)の剥離紙をはがし、取付板ごと壁面に10秒間以上強く押し付けて固定します。24時間放置後、本体を取り付けます。

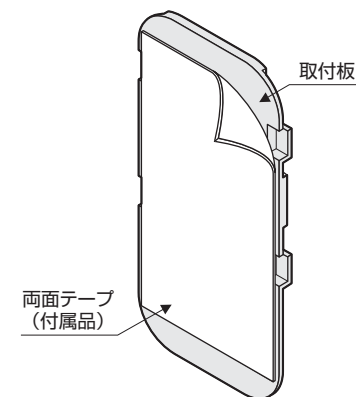

注 意



1. 塗装面や壁紙貼りの壁には、両面テープで取り付けないでください。塗装面に両面テープで取り付けると、塗装がはがれた場合など本体が落下し危険です。
2. 凹凸面やザラザラした壁面には取り付けられません。

② 本体の取り付け

本体を右図のように取付板に合わせ、本体を取付板に添わせながら下にスライドさせて取り付けます。

③ 本体の外し方

始めに電池ボックスを取り外します。電池ボックスの両側を押しながら上に押し上げてください。本体を取り外すときは右図のように指で押しながら上にスライドさせて取り外します。

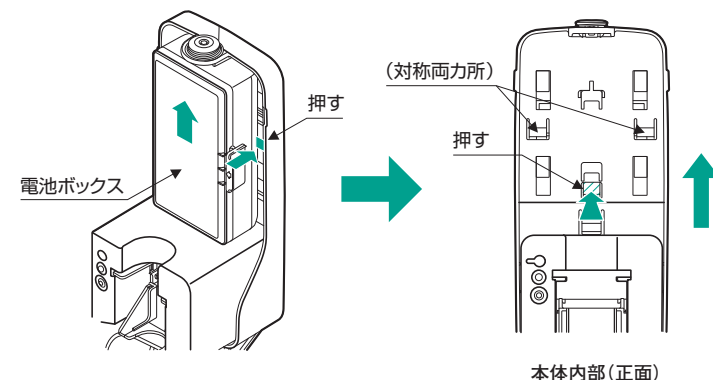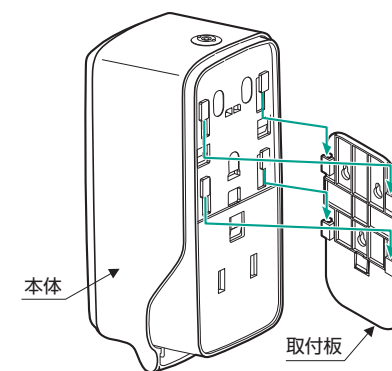

④ トレーの取り付け

本体下面から300mm以上のスペースを確保してください。トレー取付板の穴に合わせて壁面に穴をあけ、固定します。


注 意

300mm以上のスペースを確保しないと、カバーを開けた際にカバーとトレーがあたり、カバーが破損する恐れがあります。

トレーを右図のようにトレー取付板に合わせ、下にスライドさせて取り付けます。

注 意

誤作動防止のため、必ずトレーを取り付けてください。

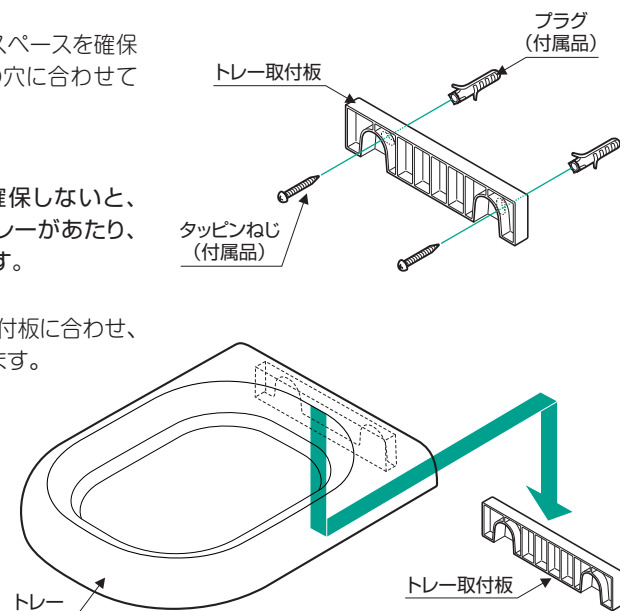

ご使用方法


本製品は、アルカリ乾電池（単1×4本）を使用して、薬液の入ったボトルから薬液を吐出（噴射）させる装置です。本体の下に手のひらを差し出すとセンサーが感知し、ノズルから薬液が1回（または2回）吐出（噴射）します。一度手を引き、再度、手のひらを差し出すことによって、繰り返し吐出（噴射）させることができます。

主な特長

センサー	センサーが手のひらを感知して薬液を吐出（噴射）させるので、本体に直接触れる必要がなく、交差汚染のリスクを低減します。
安全スイッチ	カバーを開けるとスイッチが切れ、薬液が吐出（噴射）しなくなります。
表示ランプ	センサーが手のひらを感知すると、緑色に点灯します。乾電池の寿命が近いときは、最初に緑色に点滅して電池切れ予告を行い、そのあと、赤色に点滅します。
鍵	専用の鍵でカバーを施錠できるので、薬液へのいたずらを防止できます。

カバーの開閉方法

- ① 鍵（付属品）を本体天面の鍵穴に差し込み、鍵の凹と本体のシール「開」に合わせ鍵を抜き取ります。
- ② 鍵穴/ボタンを押しながらカバーを手で持ちながら手前に開けます。閉じるときは、カバーを元に戻して、“カチッ”と音がするまで押さえます。

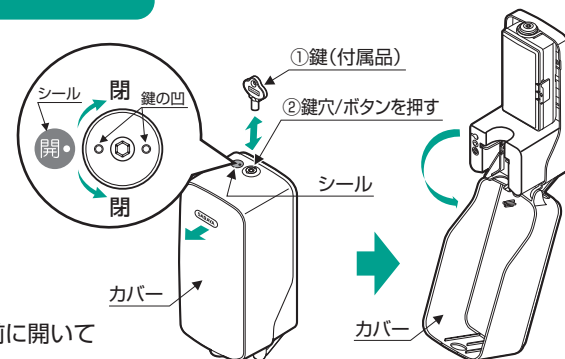

注 意

1. カバーは必ず手で持ちながら手前に開いてください。
2. カバーは重みで手前へ開くため、手で持たないと手をはさんだり、カバーが破損したりする恐れがあります。
3. 鍵はなくさないよう大切に保管してください。
4. 鍵は必要以上に力を加えると破損する恐れがあります。

乾電池の装着または交換方法

最良の状態を使用するために、新しいアルカリ乾電池（単1×4本）を使用してください。



- ① カバーを開けます。
- ② 電池ボックスのツメを押してフタを開けます。
- ③ ⊕と⊖の向きに注意して、新しいアルカリ乾電池（単1×4本）を装着します。
- ④ 電池ボックスのフタを閉めてカバーを閉めます。

注 意

1. 本製品にアルカリ乾電池（単1×4本）は付属していません。別途お買い求めください。
2. 表示ランプ（7ページ参照）が約1秒間隔で緑色に点滅すると、乾電池の寿命が近いことをお知らせします。
3. 表示ランプが約1秒間隔で赤色に点滅すると、乾電池の寿命です。新しいアルカリ乾電池（単1×4本）と交換してください。

注 意 乾電池の使用上の注意

- 乾電池の使い方を誤ると、乾電池の液漏れや発熱、破損の恐れがあります。また、ケガや機器の故障の原因になるので、必ず次のことをお守りください。
- ⊕と⊖の向きを正しく装着してください。
 - 乾電池は充電できません。
 - 長期間使用しないときは、乾電池を取り外して保管してください。
 - 新しい乾電池と使用した乾電池、または他の種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り外してください。
 - 乾電池の注意書きをよくお読みください。

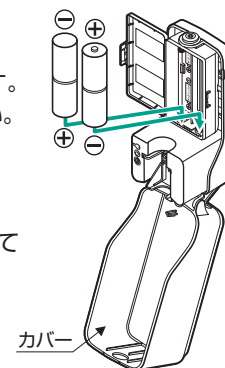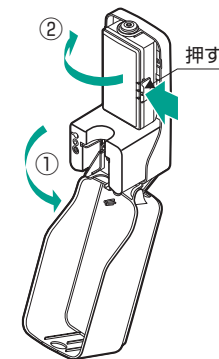


薬液の装着または交換方法

■石けん液(フォーム)を使用する場合

注 意

初期設定は、石けん液(フォーム)を使用するときの設定になっています。
石けん液(フォーム)のボトルを装着してください。

- ①カバーを開けます。
- ②ポンプ先端のキャップ栓を外し、ロックスペーサーを取り外してから、薬液ボトルを本体に装着します。
- ③カバーを閉じます。

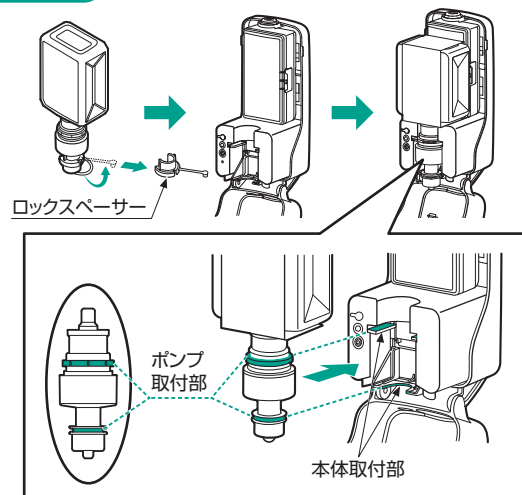


ポンプ取付部の2カ所が本体取付部の2カ所に“カチッ”と音がするまで押し込みます。

注 意

初期設定は、石けん液(フォーム)を使用するときの設定になっています。
次の要領で石けん液(リキッド)、消毒液(ジェル)の設定に変更してからボトルを装着してください。


- ①カバーを開けます。
- ②泡ポンプ固定板を外します。
(スライド部品を指で押し上げたまま、泡ポンプ固定板を下にスライドさせるように取り外してください)

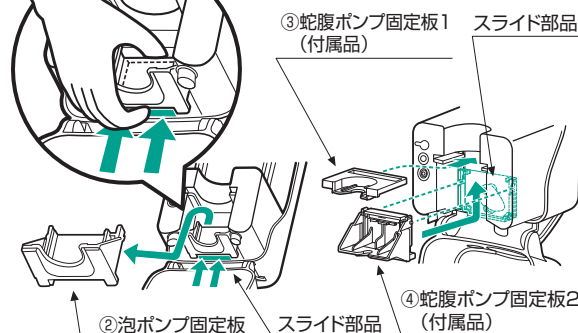

注 意

泡ポンプ固定板が外れない場合、薬液を本体に装着しない状態でカバーを閉じて、一度動作させてから外してください。

- ③蛇腹ポンプ固定板1 (付属品) を取り付けます。
※“カチッ”と音がするまで押し込みます。
- ④スライド部品へ蛇腹ポンプ固定板2 (付属品) を取り付けます。
※“カチッ”と音がするまで押し上げます。
- ⑤薬液ボトルのポンプについているキャップを取り外し、本体に装着します。
- ⑥カバーを閉じます。

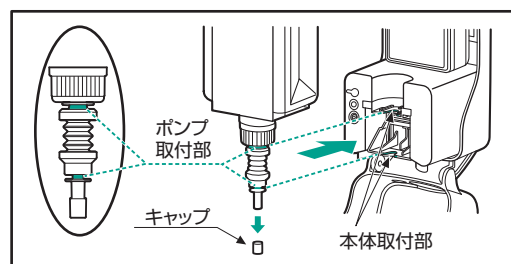

ポンプ取付部の2カ所が本体取付部の2カ所に“カチッ”と音がするまで押し込みます。

■消毒液(スプレー)を使用する場合

注 意


初期設定は、石けん液(フォーム)を使用するときの設定になっています。
次の要領で消毒液(スプレー)の設定に変更してからボトルを装着してください。

- ①カバーを開けます。
- ②泡ポンプ固定板を外します。(スライド部品を指で押し上げたまま、泡ポンプ固定板を下にスライドさせるように取り外してください)


注 意

泡ポンプ固定板が外れない場合、薬液を本体に装着しない状態でカバーを閉じて、一度動作させてから外してください。

- ③蛇腹ポンプ固定板1 (付属品) を取り付けます。※“カチッ”と音がするまで押し込みます。
- ④蛇腹ポンプ固定板2 (付属品) に吐出量調整板 (付属品) を取り付けます。
- ⑤スライド部品へ蛇腹ポンプ固定板2 (付属品) を取り付けます。※“カチッ”と音がするまで押し上げます。

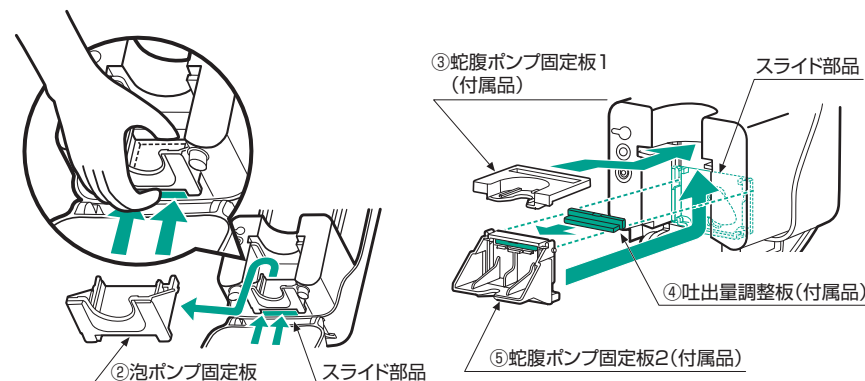

- ⑥薬液ボトルのポンプについているキャップを取り外し、本体に装着します。
- ⑦カバーを閉じます。

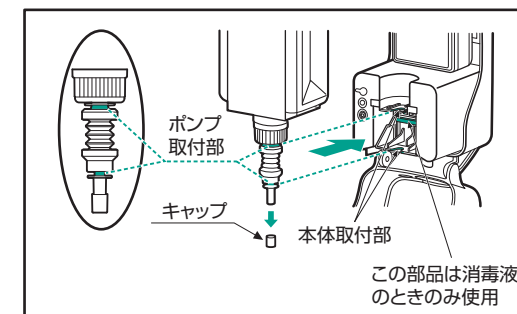


ポンプ取付部の2カ所が本体取付部の2カ所に“カチッ”と音がするまで押し込みます。

使用方法

ノズルの下に手のひらを差し出すとセンサーが感知し、ノズルから薬液が吐出（噴射）します。

注 意


1. 薬液を装着した直後は、すぐにノズルから薬液は吐出（噴射）しません。薬液が吐出（噴射）するまで、本体の下に繰り返し手のひらを差し出してください。
2. 薬液については、薬液に貼付されている『使用上の注意』などをよく読んでからお使いください。

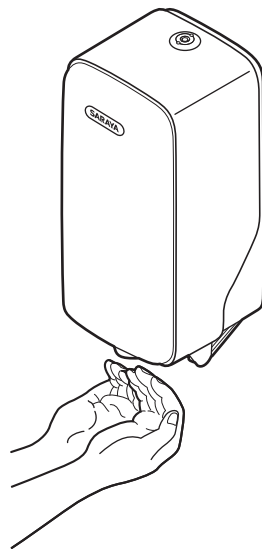

吐出（噴射）回数の設定方法

カバーを開け、吐出（噴射）回数切替スイッチを押します。押すたびに1回吐出・2回連続吐出に切り替わります。表示ランプの色で、吐出（噴射）回数の設定がわかります。

緑 色	1回吐出（噴射）
赤 色	2回連続吐出（噴射）

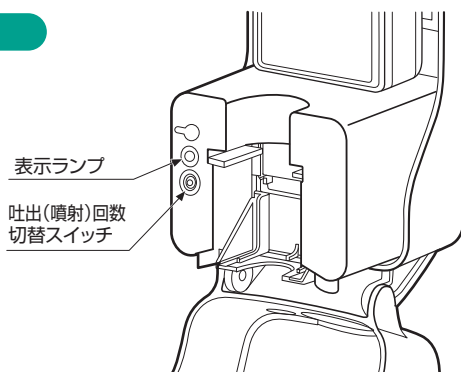

お手入れ方法

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

お手入れの際、必ずアルカリ乾電池を抜いて電源をOFFにして、表示ランプが消灯していることを確認してください。汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。そのあと、水で濡らしてよく絞った柔らかい布で洗剤を拭き取り、最後に柔らかい布で拭きしてください。

注 意 次のものは使わないでください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど

化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

ノズルの掃除方法

ノズルに薬液が固まったりゴミが詰まったりすると、吐出（噴射）が正常に行われなくなり、十分な機能が発揮されません。次の要領でノズルの掃除をしてください。


■石けん液（フォーム）の場合

- ①先端キャップを取り外します。
- ②泡ポンプ内部のメッシュを取り外し、ぬるま湯で洗います。
- ③取り外した手順と逆の手順で取り付けます。
- ④吐出（噴射）状態を確認します。

注 意

1. スプリングを失くさないようにしてください。
2. お湯を扱う際は、やけどをしないように注意してください。

※確認後、吐出（噴射）状態が異常なときは、薬液を交換してください。

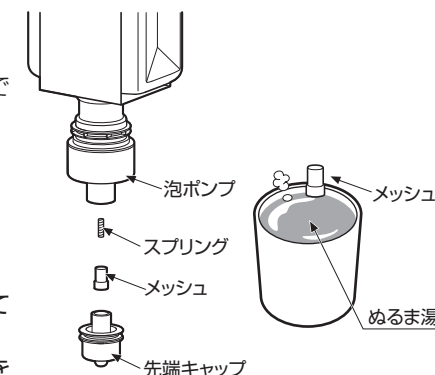


■石けん液（リキッド）・消毒液（スプレーまたはジェル）の場合

- ①ノズル先端のみを約2分間お湯（約70～80℃）に浸します。
※浸したあと、吐出（噴射）穴の付着物（薬液の結晶やゴミ）が取れていない場合は、ノズルの吐出（噴射）穴にφ0.5mm以下の針金（φ0.5mmシャープペンシル用の芯詰まり取り針など）を差し込んで付着物を取り除いてください。
- ②吐出（噴射）状態を確認します。

注 意

1. ノズルの噴射穴を針金で掃除する際、ノズル内部の部品を傷つけないように注意してください。
 2. お湯を扱う際は、やけどをしないように注意してください。
- ※確認後、吐出（噴射）状態が異常なときは、薬液を交換してください。

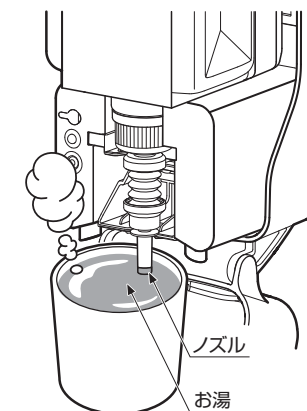

修理を依頼される前に

故障かな?…と思ったら。次のことをお調べください。

症 状	調べるところ	ページ
運転しないとき	●電池切れではありませんか? (表示ランプ:赤色点滅)	11
	●電池の方向が間違っていないですか?	12
	●センサー部分の汚れや異物などで検知し続けていませんか? (表示ランプ:赤・緑色交互点滅)	7
	●ACアダプター (オプション品) がコンセントにしっかり入っていますか?	—
	●屋内配電盤のブレーカーやヒューズが切れていませんか?	—
	●停電ではありませんか?	—
薬液が吐出しないとき	●薬液切れではありませんか?	13
	●ノズルに薬液が目詰まりしていませんか?	16
	●ポンプが本体取付部にしっかりと装着されていますか?	13

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときには、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証について

本製品には保証書が付いています。
アフターサービスに万全を期するために、ご使用いただく製品全てを当社にて登録させていただいております。本製品を取り付けたあと、保証書とお客様登録カードに必要事項をご記入のうえ、右半分のお客様登録カードは切り取って、ご返送していただきますようお願いいたします。左半分の保証書はおお客様の控えとなりますので、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、お買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

アフターサービスについて

アフターサービスでお困りの場合は
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にお知らせください。
※故障の場合は、ご購入日、本製品の型式と、できるだけ詳しい故障状態をお知らせください。

転居されるときは
ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって
お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。
ご転居先での販売店、もしくは最寄りの当社サービス拠点をご紹介させていただきます。

仕様

項 目	内 容	
品 名	サラヤ ディスポーザブル式薬液ディスペンサー	
型 式	UD-7500	
外 形 寸 法	W119×D115×H261.5mm	
製 品 質 量	約815g (梱包、付属品および薬剤は除く)	
材 質	カバー前透明ABS カバー後ABS 内部メカケースABS 取付板ABS 電池ボックスPP トレイPP	
電 源	アルカリ乾電池 (単1×4本) ACアダプター (AC100~120V 50/60Hz)	
電 源 コ ー ド	ACアダプター コード長さ:1.8m	
使 用 環 境 温 度	5~40℃	
使 用 周 囲 湿 度	20~85% (結露なきこと)	
使 用 薬 液 (※)	石けん液 (リキッド)	シャボネットF、ウォシュボンG、シャボネットコムS
	石けん液 (フォーム)	シャボネット石鹸液コムP-5泡
	消毒用アルコール	ヒビスコール液A、ヒビスコールS、アルベット手指消毒用
	消毒用アルコールジェル	サニサーウW
容 量	500mL (ディスポーザブルボトル)	
吐 出 (噴 射) 量	石けん液 (リキッド)	約1mL/回
	石けん液 (フォーム)	約0.8g/回 (11倍発泡)
	消毒用アルコール	約1.5mL/回
	消毒用アルコールジェル	約1.2mL/回

※ 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。
他社の薬液を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

This image shows a blank sheet of white paper designed as a memo pad. At the top, there is a solid dark gray horizontal band. Inside this band, the word "MEMO" is written in a bold, white, sans-serif font, positioned towards the left side. Below the gray band, the rest of the page is white and features approximately 25 thin, light gray horizontal lines spaced evenly apart, providing a guide for writing.

お問い合わせ窓口 **サラヤ株式会社** 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL. 06 (6797) 2525
電話受付：平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く）9:00～18:00
URL：<http://www.saraya.com/>

20121107-03